

TheraLift

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

PT Manual de instruções

ES Manual de instrucciones

EN Instruction manual



TM3000 · TM3001 · TM3002 · TM3003 · TM3004

TheraMart

TheraLift

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

PORTUGUÊS

Instruções de montagem	2
Manual de uso para o controle	3
Dados do produto	4

ESPAÑOL

Instrucciones de montaje	6
Manual de uso para el control	7
Datos del producto	8

ENGLISH


Assembly instructions	10
Remote control user manual	11
Product data	12

Instruções de montagem


Leia atentamente as instruções antes da montagem. Verifique todas as caixas com cuidado para identificar peças pequenas que possam ter se soltado durante o transporte. Retire todos os componentes das caixas e coloque-os sobre uma superfície macia, como um tapete, cobertor ou protetor de móveis. Identifique e confira todas as peças e ferragens conforme especificado abaixo.

A	1	B	1	C	1
					
D	1	E	1		
					

ETAPA 1

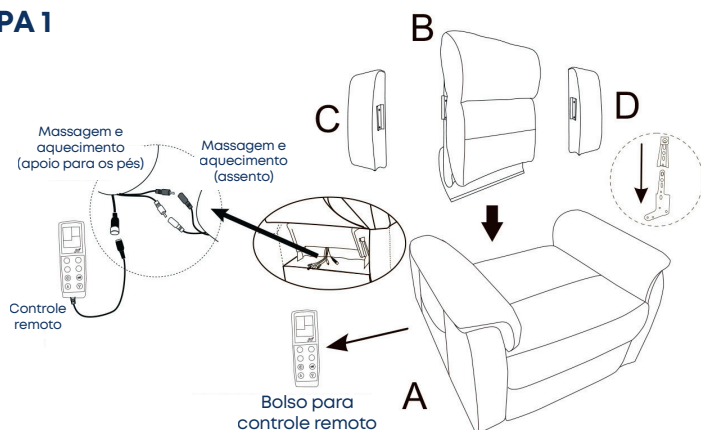

ETAPA 2

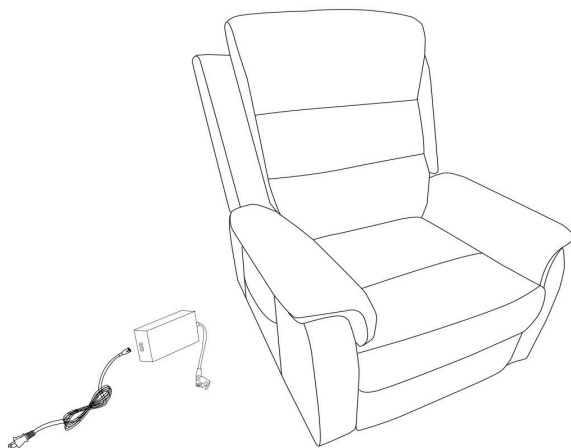

DICAS DE MONTAGEM:

- Antes de apertar completamente todos os parafusos, monte todas as peças de forma leve primeiro. Isso garante o alinhamento correto e evita uma montagem desigual.
- Quando tudo estiver ajustado corretamente, aperte bem todos os parafusos.
- Esta montagem pode exigir ajuda adicional (montagem por 2 pessoas).



- Não fique em pé nesta poltrona ou use-a como escada
- Use essa poltrona apenas para sentar uma pessoa de cada vez
- Não use essa poltrona a menos que todos os parafusos e porcas estejam firmemente seguros
- Verifique regularmente todos os parafusos e porcas
- Essa poltrona não deve ser usada com peças danificadas ou ausentes
- Entre em contato com o distribuidor autorizado para reparar ou substituir peças danificadas, defeituosas ou ausentes
- Não seguir esses avisos pode resultar em sérios danos

1. Botão de ligar

Pressione o botão de ligar uma vez para ligar; a luz indicadora vermelha acenderá. A massagem de quatro partes será ativada por padrão, a luz indicadora azul piscará, o temporizador padrão é de 10 minutos, a **intensidade da massagem é M e o modo de massagem é 1**. Pressione novamente para desligar a luz vermelha e todas as funções anteriores.

2. HEAT: Aquecimento da massagem

Pressione uma vez para ligar o aquecimento; a luz indicadora amarela acenderá. Pressione novamente para desligar. A função de aquecimento é independente e o tempo padrão é de 10 minutos.

3. MODE: Modo de massagem

Há três modos de massagem. Selecione o modo de forma sequencial; o modo padrão ao ligar é o **M1**.

M1 – modo 1 (luz indicadora azul)

M2 – modo 2 (luz indicadora azul)

M3 – modo 3 (luz indicadora azul)

4. BACK: Ponto de massagem das costas

O ponto de massagem das costas é ativado por padrão ao ligar o aparelho, e a luz indicadora azul pisca. Pressione novamente para desligar os pontos de massagem das costas e a luz indicadora. (Pressione novamente para ligar).

5. LUMBAR: Ponto de massagem lombar

O ponto de massagem lombar é ativado por padrão ao ligar o aparelho, e a luz indicadora azul pisca. Pressione novamente para desligar o ponto de massagem lombar e a luz indicadora. (Pressione novamente para ligar).

6. INTENSITY: Intensidade da massagem

Há três níveis de intensidade de massagem:


L - baixa / M - média / H - alta.

A configuração padrão é M ao ligar o aparelho.

Você pode pressionar o botão Intensity para alterar a configuração.

7. THIGH: Ponto de massagem dos glúteos

O ponto de massagem dos glúteos é ativado por padrão ao ligar o aparelho, e a luz indicadora azul pisca. Pressione novamente para desligar o ponto de massagem dos glúteos e a luz indicadora. (Pressione novamente para ligar.)

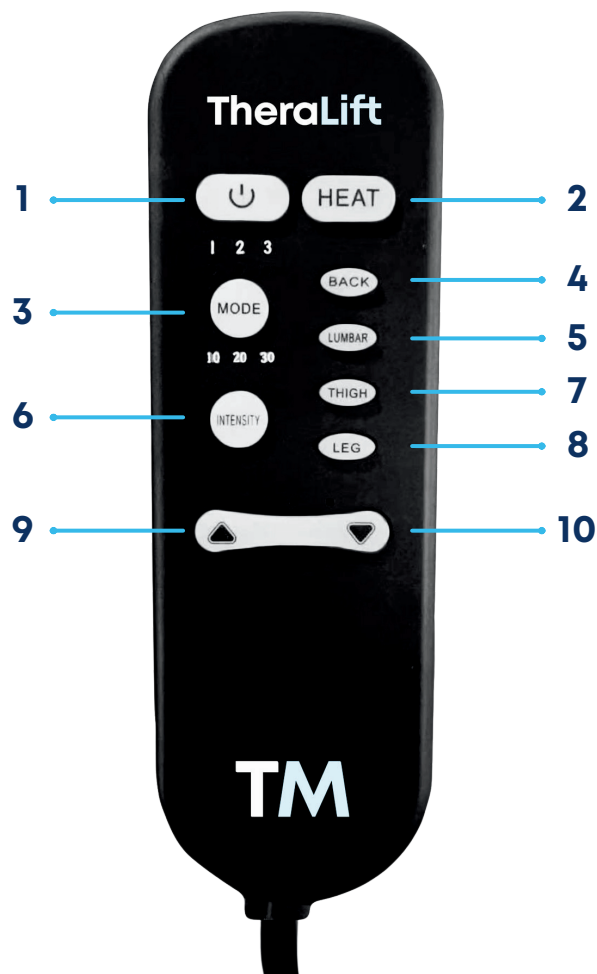

8. LEG: Ponto de massagem das pernas

O ponto de massagem das pernas é ativado por padrão ao ligar o aparelho, e a luz indicadora azul pisca. Pressione novamente para desligar os pontos de massagem das pernas e a luz indicadora. (Pressione novamente para ligar).

9. SUBIR ▲

Pressione a haste de empurrar uma vez para continuar subindo; pressione novamente para parar.

10. DESCER ▼

Pressione a haste de elevação uma vez para descer continuamente; pressione novamente para parar.



TM3000
BROWN



TM3001
BLUEBERRY



TM3002
CREAM



TM3003
MOCCHA



TM3004
NOIR

Dados do produto

Descrição

Poltrona elevatória elétrica com massagem de 8 pontos e aquecimento.

Até 3 posições:

- Poltrona
- Semicama
- Elevação

A poltrona pode permanecer em posições intermediárias. A posição deste é graduada de acordo com a necessidade e exigência do usuário

Partes do produto

- Encosto acolchoado de 3 seções.
- Apoios para os pés acolchoados.
- Apoio de braço acolchoado.
- Assento acolchoado.
- Base com rodas traseiras sem freios.
- Bolso lateral direito.
- Massagem e controle de calor.
- Controle de posições de poltrona.

Materiais

- **Produto:** estrutura de ferro, motor e estrutura de madeira.
- **Enchimento:** espuma elástica de alta densidade 30D.
- **Revestimento:** fibra de alta qualidade, couro sintético respirável e tecido.

Materiais por SKU

- TM3000: Estofamento Eco-couro à base de PU.
- TM3001: Estofamento em tecido à base de PU.
- TM3002: Estofamento em tecido à base de PU.
- TM3003: Estofamento em tecido à base de PU.
- TM3004: Estofamento Eco-couro à base de PU.

Peso máximo suportado

158 kg

Dimensões do produto

- **Dimensões gerais** 84 x 92 x 104 cm
- **Assento** 48 cm de largura x 56 cm de profundidade x 49,5 cm de altura
- **Altura do apoio de braço** 60 cm
- **Altura do encosto reclinado** 79,5 cm
- **Profundidade total totalmente estendida** 157 cm
- **Altura do apoio para os pés aberto** 52 cm

Ângulo de inclinação

Aberto 136° / **Fechado** 108°

Dados de armazenamento

Peso neto | Produto

40.8 kg

Dimensiones de la caja de envío

86 x 76 x 65 cm

Peso da caixa de embarque

43.8 kg

Unidades por caixa de embarque

1

Instruções de limpeza

- **Produtos de limpeza permitidos:** água, sabão neutro com água, álcool isopropílico diluído (70%) e lenços desinfetantes.
- **Produtos de limpeza não recomendados:** produtos químicos fortemente corrosivos, limpadores abrasivos, solventes orgânicos fortes, lavadoras a vapor de alta pressão ou enxágue direto com água.

Mantenimiento preventivo para el cuero ecológico

- Hidratante para Couro.
- Frequência: Aplicar a cada 3 meses.

Passos:

- Limpeza: Limpe a superfície com um pano macio.
- Aplicação: Aplique o hidratante de couro de forma uniforme.
- Absorção: Deixe o hidratante absorver por 15 minutos.
- Polimento: Lustre com um pano limpo e seco.

Condições de armazenamento

- Evite a luz solar direta.
- Local interno seco, ventilado e fresco.

Especificações técnicas

Sistema

- Elétrico.
- Somente em caso de falha elétrica ou corte de energia a cadeira retornará automaticamente à sua posição original.

Tensão de saída nominal

AC100-240V

Faixa de tensão de entrada

DC29V-1.8A

Garantia


A estrutura de ferro possui garantia de 5 anos. O motor, a estrutura de madeira, a espuma de alta elasticidade 30D, a fibra de qualidade premium, o couro sintético e o tecido possuem garantia de 2 anos. *Danos causados por uso incorreto ou erro humano não estão cobertos pela garantia.*

Instrucciones de montaje


Lea atentamente las instrucciones antes del ensamblaje. Revise todas las cajas con cuidado para detectar piezas pequeñas que puedan haberse soltado durante el transporte. Retire todos los componentes de las cajas y colóquelos sobre una superficie suave, como una alfombra, manta o protector para muebles. Identifique y verifique todas las piezas y herrajes según se especifica a continuación.

A	1	B	1	C	1
					
D	1	E	1		
					

PASO 1

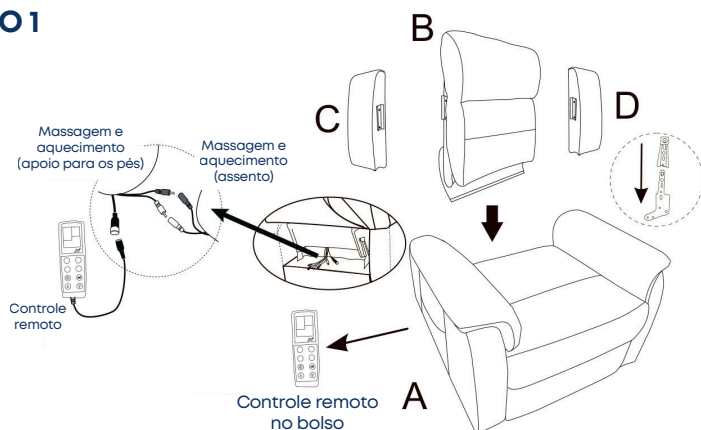

PASO 2

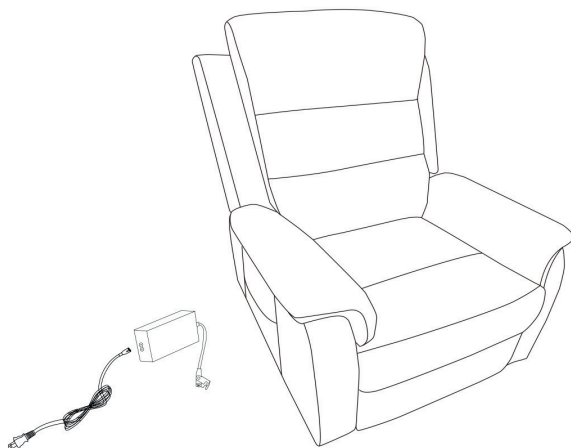

CONSEJOS DE ENSAMBLAJE:

- Antes de apretar completamente todos los tornillos, ensamble todas las piezas de manera ligera primero. Esto asegura un correcto alineamiento y evita un armado desigual.
- Una vez que todo encaje correctamente, apriete bien todos los tornillos.
- Este armado puede requerir ayuda adicional (instalación por 2 personas).



ADVERTENCIAS

- No se pare sobre este sillón ni lo use como escalera
- Use este sillón solo para sentar una persona a la vez
- No use este sillón a menos que todos los pernos, tornillos y tuercas estén firmemente asegurados
- Compruebe todos los pernos, tornillos y tuercas con regularidad
- Este sillón no debería usarse con partes dañadas o partes que falten
- Póngase en contacto con el distribuidor autorizado para que repare o reemplace las partes dañadas, defectuosas o faltantes
- El no seguir estas advertencias podría resultar en serios daños

1. Botón de encendido

Presione el botón de encendido una vez para encenderlo, la luz indicadora roja se iluminará, el masaje de cuatro partes se activará de forma predeterminada, la luz indicadora azul parpadeará, el temporizador predeterminado es de 10 minutos, **la intensidad del masaje es M y el modo de masaje es 1**; presiónelo nuevamente, la luz indicadora roja se apagará y las funciones anteriores también se apagarán.

2. HEAT: Calefacción de masaje

Presione una vez para encender la calefacción; el indicador amarillo se encenderá; presione de nuevo para apagarla. La función de calefacción se configura de forma independiente y el tiempo predeterminado es de 10 minutos.

3. MODE: Modo de masaje

Hay tres modos de masaje, seleccione el modo de masaje por turnos; el modo predeterminado es **M1** cuando la máquina está encendida.

M1 - modo 1 (la luz indicadora es azul)

M2 - modo 2 (la luz indicadora es azul)

M3 - modo 3 (la luz indicadora es azul)

4. BACK: Cambio de punto de masaje de espalda

El punto de masaje de espalda se activa de forma predeterminada cuando se enciende la máquina y la luz indicadora parpadea en azul. Presiónelo nuevamente para apagar los puntos de masaje de espalda y la luz indicadora se apaga (presiónelo nuevamente para encenderlo).

5. LUMBAR: Cambio de punto de masaje lumbar

El punto de masaje de cintura se activa de forma predeterminada cuando se enciende la máquina y la luz indicadora parpadea en azul. Presiónelo nuevamente para apagar el punto de masaje de cintura y la luz indicadora se apaga (presiónelo nuevamente para encenderlo).

6. INTENSITY: Intensidad del masaje


Hay tres niveles de intensidad de masaje:

L - bajo / M - medio / H - alto.

La configuración predeterminada es la velocidad **M** al encender el dispositivo. Puede pulsar el botón **Intensity** para cambiar la configuración.

7. THIGH: Cambio de punto de masaje de glúteos

El punto de masaje de cadera se activa de forma predeterminada cuando se enciende la máquina y la luz indicadora parpadea en azul. Presiónelo nuevamente para apagar el punto de masaje de cadera y la luz indicadora se apaga (presiónelo nuevamente para encenderlo).

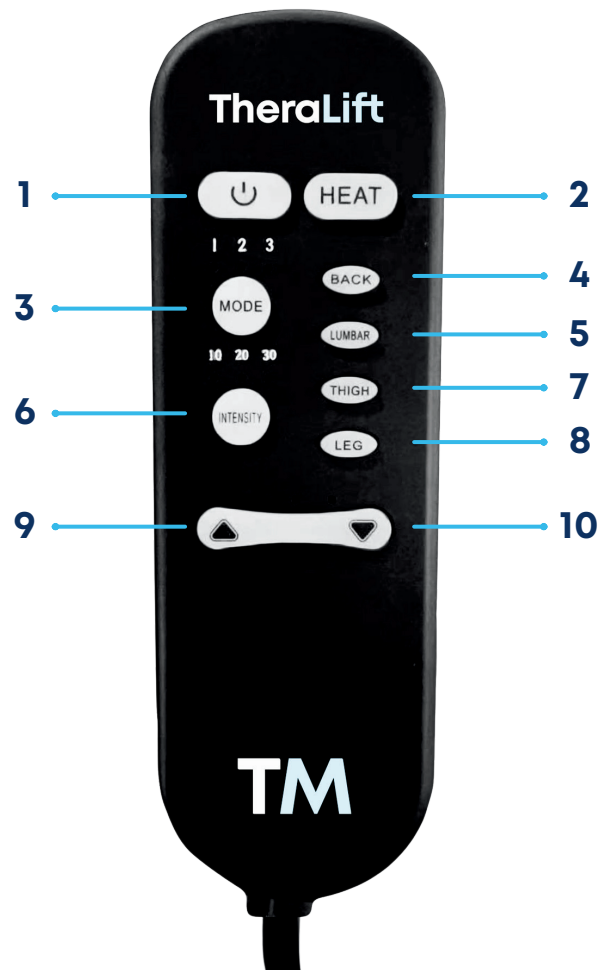

8. LEG: Cambio de punto de masaje de piernas

El punto de masaje de piernas se activa de forma predeterminada cuando se enciende la máquina y la luz indicadora parpadea en azul. Presiónelo nuevamente para apagar los puntos de masaje de piernas y la luz indicadora se apaga (presiónelo nuevamente para encenderlo).

9. ARRIBA ▲

Presione la varilla de empuje una vez para continuar subiendo, presiónela nuevamente para detenerla.

10. ABAJO ▼

Presione la varilla de empuje una vez para continuar descendiendo, presiónela nuevamente para detenerse.



TM3000
BROWN



TM3001
BLUEBERRY



TM3002
CREAM



TM3003
MOCCHA



TM3004
NOIR

Datos del producto

Descripción

Sillón elevador eléctrico con masaje de 8 puntos y función de calefacción.

Hasta 3 posiciones:

- Sillón
- Semi cama
- Elevación

El sillón puede permanecer en posiciones intermedias. Su posición se gradúa de acuerdo con la necesidad y exigencia del usuario.

Partes del producto

- Respaldo acolchonado de 3 secciones.
- Apoyos acolchonados para los pies.
- Apoyo de brazo acolchonado.
- Asiento acolchonado.
- Base con ruedas traseras sin frenos.
- Bolsillo lateral derecho.
- Masaje y control de calor.
- Control de posiciones del sillón.

Materiales

- **Producto:** estructura de hierro, motor y marco de madera.
- **Relleno:** espuma elástica de alta densidad 30D.
- **Cubierta:** fibra de alta calidad, cuero sintético transpirable y tela.

Materiales por SKU

- TM3000: Tapizado en cuero ecológico a base de PU.
- TM3001: Tapizado en tela a base de PU.
- TM3002: Tapizado en tela a base de PU.
- TM3003: Tapizado en tela a base de PU.
- TM3004: Tapizado en cuero ecológico a base de PU.

Peso máximo soportado

158 kg

Dimensiones del producto

- **Dimensiones generales** 84 x 92 x 104 cm
- **Asiento** 48 cm de ancho x 56 cm de profundidad x 49.5 cm de altura
- **Altura del apoyabrazos** 60 cm
- **Altura del respaldo reclinado** 79.5 cm
- **Profundidad total completamente extendido** 157 cm
- **Altura del reposapiés abierto** 52 cm

Ángulo de inclinación

Abierto 136° / **Cerrado** 108°

Datos de almacenamiento

Peso Neto | Producto

40.8 kg

Dimensiones de la caja de envío

86 x 76 x 65 cm

Peso de la caja de embarque

43.8 kg

Unidades por caja de embarque

1

Instrucciones de limpieza

- **Productos de limpieza permitidos:** agua, jabón neutro con agua, alcohol isopropílico diluido (70%) y toallitas desinfectantes.
- **Productos de limpieza no recomendados:** productos químicos fuertemente corrosivos, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos fuertes, limpiadoras a vapor de alta presión o enjuague directo con agua.

Mantenimiento preventivo para el cuero ecológico

- Hidratante para Cuero.
- Frecuencia: Aplicar cada 3 meses.

Pasos:

- Limpieza: Limpie la superficie con un paño suave.
- Aplicación: Aplique un hidratante para cuero de manera uniforme.
- Absorción: Deje que el hidratante se absorba durante 15 minutos.
- Pulido: Lustre con un paño limpio y seco.

Condiciones de almacenamiento

- Evite la luz solar directa.
- Lugar interior seco, ventilado y fresco.

Especificaciones técnicas

Sistema

- Eléctrico.
- Solo en caso de falla eléctrica o corte de energía, el sillón volverá automáticamente a su posición original.

Tensión de salida nominal

AC100-240V

Rango de tensión de entrada

DC29V-1.8A

Garantía


La estructura de hierro tiene una garantía de 5 años. El motor, la estructura de madera, la espuma de alta elasticidad 30D, la fibra de calidad premium, el cuero sintético y la tela tienen una garantía de 2 años. *Los daños causados por mal uso o error humano no están cubiertos por la garantía.*

Assembly instructions


Please read the instructions carefully before assembly. Check all boxes thoroughly for small parts that may have come loose during transportation. Remove all components from the boxes and place them on a soft surface such as a carpet, blanket, or furniture pad. Identify and verify all parts and hardware as specified below.

A	1	B	1	C	1
D	1	E	1		

STEP 1

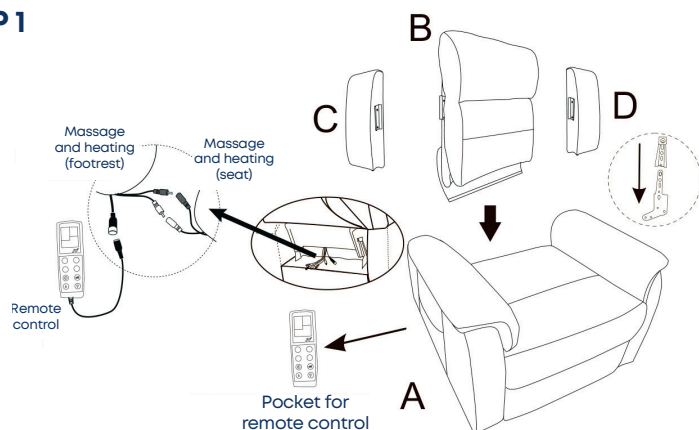

STEP 2

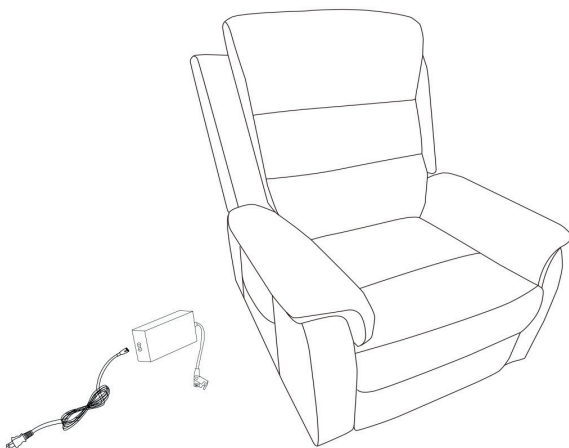

ASSEMBLY TIPS:

- Before tightening all screws completely, assemble all parts loosely first. This ensures proper alignment and prevents uneven assembly.
- Once everything fits correctly, tighten all screws securely.
- This assembly may require additional help (2 person set up).



WARNING

- Do not stand in this chair, do not use this chair as a step ladder
- Use this chair only for seating one person at a time
- Do not use this chair unless all bolts, screws and knobs are firmly secured
- Check all bolts, screws and knobs on a regular basis
- This chair should not be used with damaged or missing parts
- Contact and authorized service provider to repair or replace damaged or missing parts
- Failure to follow these warnings could result in serious injury

1. Power button

Press the power button once to turn it on; the red indicator light will illuminate. The four-part massage will activate by default, the blue indicator light will flash, the default timer is 10 minutes, **the massage intensity is M, and the massage mode is 1**. Press it again, the red indicator light will turn off, and the previous functions will also shut down.

2. HEAT: Massage heating

Press once to turn on the heating; the yellow indicator will light up. Press again to turn it off. The heating function operates independently, and the default time is 10 minutes.

3. MODE: Massage mode

There are three massage modes. Select the mode in sequence; the default mode is **M1** when the unit is turned on.

M1 – Mode 1 (blue indicator light)

M2 – Mode 2 (blue indicator light)

M3 – Mode 3 (blue indicator light)

4. BACK: Back massage point switch

The back massage point is activated by default when the unit is turned on, and the blue indicator light flashes. Press again to turn off the back massage points and the indicator light. (Press again to turn it back on).

5. LUMBAR: Lumbar massage point switch

The lumbar massage point is activated by default when the unit is turned on, and the blue indicator light flashes. Press again to turn off the lumbar massage point and the indicator light. (Press again to turn it back on).

6. INTENSITY: Massage intensity

There are three levels of massage intensity:


L - Low / M - Medium / H - High.

The default setting is M when the device is turned on.

You can press the Intensity button to change the setting.

7. THIGH: Thigh massage point switch

The thigh massage point is activated by default when the unit is turned on, and the blue indicator light flashes. Press again to turn off the thigh massage point and the indicator light. (Press again to turn it back on).

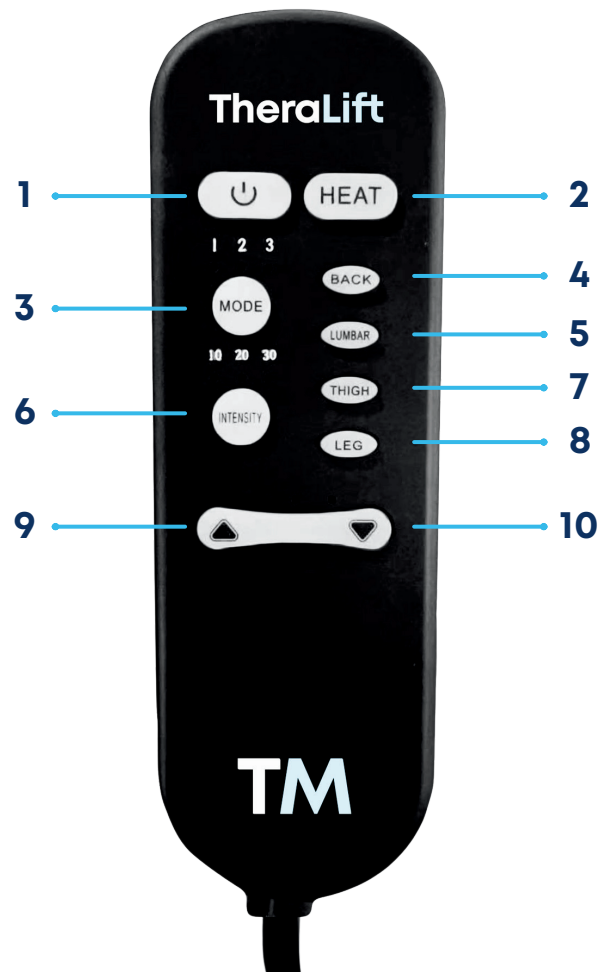

8. LEG: Leg massage point switch

The leg massage point is activated by default when the unit is turned on, and the blue indicator light flashes. Press again to turn off the leg massage points and the indicator light. (Press again to turn it back on).

9. UP ▲

Press the push rod once to move upward continuously; press again to stop.

10. DOWN ▼

Press the push rod once to move downward continuously; press again to stop.



TM3000
BROWN



TM3001
BLUEBERRY



TM3002
CREAM



TM3003
MOCCHA



TM3004
NOIR

Product Data

Description

Electric lift chair with 8-point massage and heating.

Up to 3 positions:

- Armchair
- Semi-bed
- Elevation

The armchair can remain in intermediate positions. The position is adjustable according to the user's needs and requirements.

Product parts

- Padded backrest with 3 sections.
- Padded footrests.
- Padded armrest.
- Padded seat.
- Base with rear wheels without brakes.
- Right side pocket.
- Massage and heat control.
- Armchair position control.

Materials

- **Product:** iron frame, motor, wooden frame.
- **Filling:** 30D high elastic foam.
- **Cover:** premium quality fiber, air leather and fabric.

Materials by SKU

- TM3000: Eco-leather upholstery based on PU.
- TM3001: Fabric upholstery based on PU.
- TM3002: Fabric upholstery based on PU.
- TM3003: Fabric upholstery based on PU.
- TM3004: Eco-leather upholstery based on PU.

Maximum supported weight

158 kg

Product dimensions

- **Overall** 84 x 92 x 104 cm
- **Seat** 48 width x 56 depth x 49.5 height cm
- **Armrest height** 60cm
- **Back height when reclined** 79.5 cm
- **Total depth when fully extended** 157cm
- **Footrest height when open** 52 cm

Angle of inclination

Opened 136° / **Closed** 108°

Storage Data

Net weight | Product

40.8 kg

Shipping box dimensions

86 x 76 x 65 cm

Shipping box weight

43.8 kg

Units per shipping box

1

Cleaning instructions

- **Permitted Cleaning Products:** water, mild soap with water, diluted isopropyl alcohol (70%), disinfectant wipes.
- **Cleaning Products Not Recommended:** strong corrosive chemicals, abrasive cleaners, strong organic solvents, high-pressure steam cleaners or direct water rinsing.

Preventive maintenance for eco-leather

- Leather Moisturizer.
- Frequency: Apply every 3 months.

Steps:

- Cleaning: Clean the surface with a soft cloth.
- Application: Apply the leather moisturizer evenly.
- Absorption: Let the moisturizer absorb for 15 minutes.
- Polishing: Buff with a clean, dry cloth.

Storage conditions

- Avoid direct sunlight.
- Dry, ventilated, cool indoor place

Technical Specifications

System

- Electric.
- Only in case of electrical failure or power outage, the chair will automatically return to its original position.

Nominal output voltage

AC100-240V

Input voltage range

DC29V-1.8A

Warranty

The iron frame has a 5-year warranty. The motor, wooden frame, 30D high-elastic foam, premium-quality fiber, air leather, and fabric have a 2-year warranty. *Damage caused by misuse or human error is not covered under warranty.*

TheraLift

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

TheraMart é uma marca da Thera Group INC.
TheraMart es una marca de Grupo Thera INC.
TheraMart is a brand of Grupo Thera INC.

Oceania Business Plaza,
43th Floor, Punta Colón St.,
Panamá City, Panamá.

BRASIL

Importado e distribuído por:
TheraMart Brasil Ltda.

CNPJ: 45.784.439/0001-90

Endereço: Rua Brusque, 1078, Térreo Box 02,
Centro, CEP: 88.302-001, Itajaí-SC
SAC: parceiro@theramart.com

Responsável Técnico:

Priscila de Gouveia Zamboni Lins CRF-SC 20958

Informações de contrato no Brasil:

parceiro@theramart.com

LATAM

Información de contacto en el resto de LATAM:

info@theramart.com

TheraMart